


# Coussin Kalli visco




**Les conseils de Sonia Baudry  
Ergothérapeute D.E.**

Je recommande le Kalli visco aux personnes qui ont besoin de repères anatomiques pour s'installer correctement au fauteuil. Ce coussin prévient le risque de formation d'escarres lié à un mauvais positionnement du bassin et des membres inférieurs.

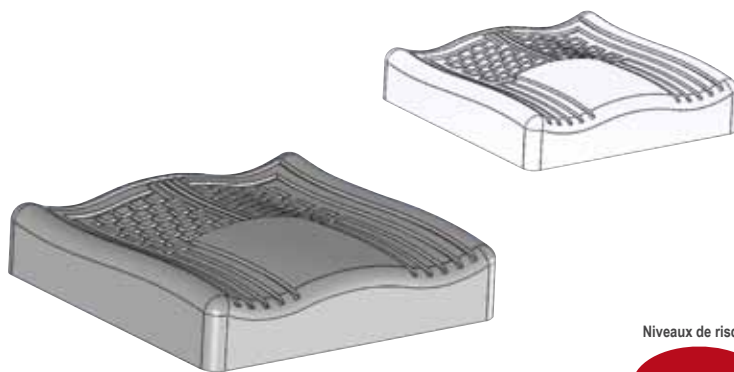

Livré avec 2 housses Pharmatex identiques

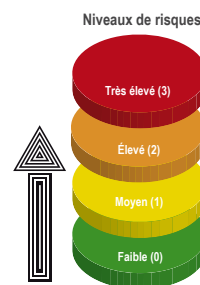

Le coussin KALLI visco à forme anatomique, en mousse viscoélastique, s'adapte à la morphologie des personnes. Il assure une meilleure stabilisation du bassin, une bonne répartition des pressions en alliant bon positionnement et confort en position assise. Il procure une sensation naturelle de confort.

## Préconisations d'utilisation

Utilisation adaptée pour les personnes ne présentant pas de troubles de la statique posturale au fauteuil (sur le plan frontal ou sagittal), en institutions (EHPAD, ...) et à domicile.

## Conseils d'entretien

Nettoyage du coussin :  
à la vapeur saturante sans ajout de formol, produit désinfectant ou eau savonneuse. Bien laisser sécher à l'air libre avant de remettre la housse.

Nettoyage de la housse :  
- au quotidien : avec une éponge et de l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire.  
- en machine :



## Références et dimensions

Références	Largeur	Profondeur	Hauteur
<b>17.17234</b>	37,5 cm	38 cm	8 cm
<b>17.17294</b>	40 cm	40 cm	8 cm
<b>17.17295</b>	42 cm	42 cm	8 cm
<b>17.17267</b>	43 cm	44 cm	8 cm
<b>17.17235</b>	46 cm	45 cm	8 cm
<b>17.17236</b>	48 cm	43 cm	8 cm
<b>17.17299</b>	50 cm	45 cm	8 cm

## Composition

Mousse viscoélastique : 80 kg/m<sup>3</sup>  
Housse en pharmatex : 65 % polyuréthane, 35 % polyester  
Dessous anti-glisse : 57 % polyuréthane, 43 % polyester  
Normes au feu : EN597-1 et EN597-2

Produit CE