

CARE CONCEPT
POZ' IN' FORM[®]
PHARMAOUEST INDUSTRIES

NOUVEAUTÉ

CARE CONCEPT
POZ' IN' FORM[®]
Lenzing FR[®] PHARMAOUEST INDUSTRIES

NOUVEAUTÉ

AIDES TECHNIQUES DE POSITIONNEMENT

EFFET MÉMOIRE

HOUSSE AMOVIBLE

CONFORTABLE



EFFICACE

DURABLE

ANTIBACTÉRIEN

ANTIFONGIQUE




Visionnez notre film sur
www.pharmaouest.fr

**POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION
DES ESCARRES**

PRÉVENTION DES ESCARRES

L'association d'une fibre longue, creuse à effet mémoire, d'un tissu micromaillé, et de housses Pharmatex ou Lenzing FR® donne à POZ' IN' FORM® des caractéristiques particulièrement efficaces dans la prévention des escarres. La résilience de la fibre, combinée à la respirabilité maximum du tissu micromaillé, apporte un soutien et une absorption des appuis favorables à une bonne répartition des pressions et à une diminution des forces de cisaillement.

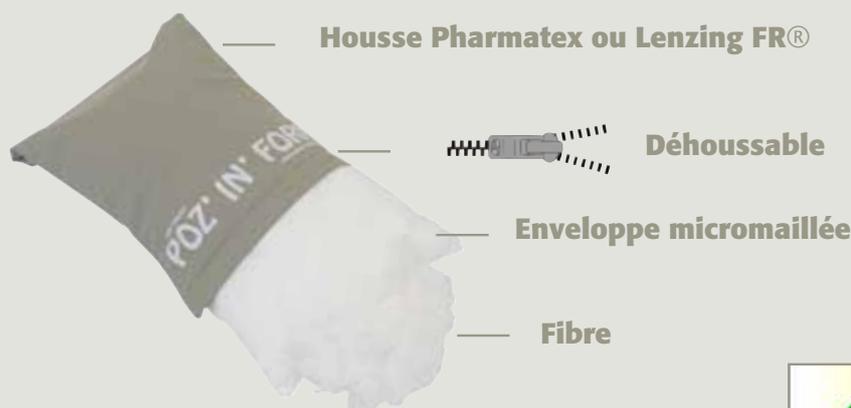

POSITIONNEMENT EFFICACE

POZ' IN' FORM® garantit un positionnement efficace et confortable dans le temps; les fibres longues empêchent les effets de fluage régulièrement observés dans le positionnement classique. De plus, leur densité prévient toute dégradation prématurée du support. La diversité des formes, des tailles et le nombre des éléments POZ' IN' FORM® permettent une variété importante de combinaisons.

MODULARITÉ ET CONFORT

Le positionnement du patient, en situation allongée de manière permanente, associé à un support de qualité, doit permettre une amélioration de la posture vicieuse, une diminution des risques d'apparition des escarres et cela dans des conditions de sécurité d'utilisation liées aux risques d'infections.

PHARMATEX OU LENZING FR®

Les éléments et modules POZ' IN' FORM® sont entièrement déhoussables et lavables. Ils sont disponibles avec une housse Pharmatex ou Lenzing FR®.

La housse Pharmatex en polyuréthane enduit, bi-élastique est particulièrement recommandée pour une utilisation en milieu hospitalier ou en collectivité.

Le toucher du Pharmatex est très doux (type peau de pêche) rendant ainsi son contact agréable. Sa surface lisse et souple facilite son nettoyage.

La housse Lenzing FR® est constituée d'un textile lyocell et viscose rendu imperméable par un contrecollage d'une membrane polyuréthane.

Le confort du Lenzing FR® représente une innovation majeure dans le positionnement de la personne allongée; en effet, POZ' IN' FORM® Lenzing FR® empêche la macération, souvent augmentée par les revêtements traditionnels. La viscose issue du bois, grâce à ses propriétés hygroscopiques, va absorber l'humidité due au contact avec la peau du malade. De plus, les caractéristiques d'élasticité et de souplesse (déformation de 60% du tissu dans tous les sens) du Lenzing FR® sont particulièrement adaptées aux contraintes rencontrées dans le positionnement.

Pharmatex est :

CRIB5

Certifié Oeko-tex 100 class 1

Respirabilité > à 500g/m²/24h-37°C)

Imperméabilité : ++

Absorption de la transpiration : +

Lenzing FR® est :

Résistant au feu (SO 12952, BS 7175, CRIB7)

Certifié Oeko-tex 100 class 1

Respirabilité > à 200g/m²/24h-37°C)

Imperméabilité : +++

Absorption de la transpiration : +++

ENTRETIEN

Housse PHARMATEX bi-élastique



Housse Lenzing FR®



Enveloppe micromaillée + fibre



GARNISSAGE : Fibre Micromax à mémoire de forme



Universel 22/902

Universel 22/901

Décubitus 22/930



Universel 22/903

Semi-fowler 22/920

Universel 22/901

Triangulaire 22/910

Cylindrique 22/940



Sac de transport

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage

Lire attentivement la notice. 

COUSSINS UNIVERSELS

Les 3 dimensions des coussins universels permettent des applications diverses. En position allongée, la dimension 55 x 40 cm (base) permet la mise en flexion des genoux et un positionnement en abduction modérée des hanches. Les éléments de taille inférieure (plots) permettent des calages en position optimisée diminuant ainsi les risques d'escarres ou de positions vicieuses.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Référence PLOT	22/901	22/901LEN
Longueur	35 cm	35 cm
Profondeur	25 cm	25 cm
Housse de rechange	22/901H	22/901HLEN
Référence BASE	22/902	22/902LEN
Longueur	55 cm	55 cm
Profondeur	40 cm	40 cm
Housse de rechange	22/902H	22/902HLEN
Référence PLOT	22/903	22/903LEN
Longueur	40 cm	40 cm
Profondeur	15 cm	15 cm
Housse de rechange	22/903H	22/903HLEN

COUSSIN TRIANGULAIRE

Il s'adapte parfaitement à l'ensemble des morphologies. Placé sous les genoux, il assure un maintien, au repos, de l'articulation et réduit considérablement le phénomène de glissement vers l'avant pour prévenir des effets de friction et de cisaillement au niveau du sacrum. En position semi-fowler, il décharge les zones à risque (sacrum - ischiens - talons) en transférant les pressions vers les zones à moindre risque (mollets - cuisses - dos).



	Pharmatex	Lenzing FR®
Référence BASE	22/910	22/910LEN
Longueur	56 cm	56 cm
Profondeur	32 cm	32 cm
Hauteur	28 cm	28 cm
Housse de rechange	22/910H	22/910HLEN

COUSSIN CYLINDRIQUE

Placé entre les jambes, il évite les phénomènes de friction et de cisaillement au niveau des cuisses et des genoux. Il peut également être utilisé sous les chevilles pour assurer une décharge talonnière.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Référence BASE	22/940	22/940LEN
Longueur	75 cm	75 cm
Diamètre	18 cm	18 cm
Housse de rechange	22/940H	22/940HLEN

COUSSIN BOUÉE

Le coussin bouée est utilisé en complément des coussins universels, triangulaires ou cylindriques, pour venir en appui de leur correction de positionnement. Utilisé comme collier de décharge, il permet un soulagement des appuis de la zone cervicale.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Référence PLOT	22/965	22/965LEN
Longueur	135 cm	135 cm
Largeur	20 cm	20 cm
Housse de rechange	22/965H	22/965HLEN

COUSSIN DEMI-BOUÉE

Associé au coussin cylindrique, la combinaison évite les phénomènes de friction à l'entre-jambes, au niveau des genoux, des cuisses et assure une mise en abduction des hanches.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Référence PLOT	22/960	22/960LEN
Longueur	105 cm	105 cm
Largeur	22 cm	22 cm
Housse de rechange	22/960H	22/960HLEN

COUSSIN ABDUCTION

Il se place à l'entre-jambes du patient en position allongée pour une mise en abduction des hanches et pour stabiliser les jambes en position écartée limitant ainsi les phénomènes de friction et de cisaillement entre les cuisses, les genoux et les mollets.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Référence PLOT	22/950	22/950LEN
Longueur	35 cm	35 cm
Petite largeur	10 cm	10 cm
Grande largeur	30 cm	30 cm
Hauteur	15 cm	15 cm
Housse de rechange	22/950H	22/950HLEN

AIDES TECHNIQUES de POSITIONNEMENT en DÉCUBITUS DORSAL

COUSSIN SEMI-FOWLER

En position alitée ou semi-fowler, il cale et maintient parfaitement le dos du patient. Il procure au patient un calage des appuis dorsaux ainsi qu'un positionnement optimisé des membres supérieurs.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Référence	22/920	22/920LEN
Longueur	200 cm	200 cm
Largeur	30 cm	30 cm
Housse de rechange	22/920H	22/920HLEN

AIDES TECHNIQUES de POSITIONNEMENT en DÉCUBITUS SEMI LATÉRAL

COUSSIN DÉCUBITUS SEMI LATÉRAL

Coussin polyvalent, il maintient confortablement le patient aussi bien au niveau des épaules, du dos, des hanches que des genoux lors d'un positionnement en décubitus latéral. De plus, il limite les phénomènes de friction et de cisaillement.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Référence	22/930	22/930LEN
Longueur	185 cm	185 cm
Largeur	35 cm	35 cm
Housse de rechange	22/930H	22/930HLEN

AIDES TECHNIQUES de POSITIONNEMENT de DÉCHARGE des 2 TALONS

COUSSIN de DÉCHARGE et de POSITIONNEMENT

Grâce à une sangle fixée au pied du matelas, il assure une décharge totale du talon et maintient confortablement la position des chevilles et des hanches.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Référence BASE	22/970	22/970LEN
Longueur	85 cm	85 cm
Largeur	25 cm	25 cm
Housse de rechange	22/970H	22/970HLEN

AIDES TECHNIQUES de POSITIONNEMENT de DÉCHARGE de l'APPUI de TALON

COUSSIN DÉCLIVE de POSITIONNEMENT des GENOUX

Le coussin de positionnement pour le pied permet un transfert des pressions du talon vers les zones à moindre risque (mollets-genoux) pour offrir une décharge talonnière efficace et un bon positionnement de la cheville. En cas de problème vasculaire, il garantit un bon retour veineux. Sa dimension permet d'éviter une accentuation des appuis sur le tendon d'achille.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Référence	22/985	22/985LEN
Longueur	48 cm	48 cm
Largeur	30 cm	30 cm
Hauteur	12 cm	12 cm
Housse de rechange	22/985H	22/985HLEN

AIDES TECHNIQUES de POSITIONNEMENT du MEMBRE SUPÉRIEUR

COUSSIN DÉCHARGE de l'APPUI de la MAIN

Le coussin de positionnement pour la main réduit fortement les pressions sur la peau et sur les zones à risque d'escarres. En situation postopératoire, il soulage les points d'appuis sur des zones localisées et permet également une décharge au niveau des coudes. Sa dimension permet d'éviter une accentuation des appuis sur le poignet.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Référence	22/980	22/980LEN
Longueur	45 cm	45 cm
Largeur	23 cm	23 cm
Hauteur	8,5 cm	8,5 cm
Housse de rechange	22/980H	22/980HLEN

AIDES TECHNIQUES à la PRÉVENTION des ESCARRES OCCIPITALES

COUSSIN DÉCHARGE OCCIPITALE

Outre un positionnement stabilisé, la décharge centrale du coussin entraîne une diminution effective des pressions de la zone occipitale. La combinaison de la mousse viscoélastique et de la fibre longue permet un allègement régulier des zones en contact.



	Pharmatex	Lenzing FR®
Référence	22/990	22/990LEN
Longueur	50 cm	50 cm
Largeur	40 cm	40 cm
Hauteur	9 cm	9 cm
Housse de rechange	22/990H	22/990HLEN

AIDES DE POSITIONNEMENT À MÉMOIRE DE FORME

DEMI-BOUÉE



Référence : 22/22300

TRIANGLE D'ABDUCTION avec maintien fémoral



Référence : 22/22200

COUSSIN ANTI-ÉQUIN



Référence : 22/22000 pour 1 jambe 80,5 x 30,5 x 24 cm
Référence : 22/22010 pour 2 jambes 80,5 x 30,5 x 66 cm

COUSSIN SEMI-LATÉRAL 30°



Référence : 22/22700 71 x 40 x 28 cm
Référence : 22/22750 85 x 31 x 17 cm

DEMI-CYLINDRE de POSITIONNEMENT



Référence : 22/22100 21 x 18 x 10 cm
Référence : 22/22110 35 x 18 x 10 cm
Référence : 22/22120 42 x 18 x 10 cm
Référence : 22/22130 51 x 18 x 10 cm
Référence : 22/22060 85 x 18 x 10 cm

COUSSIN POPLITAL



Référence : 22/22050

